

# 사용설명서

OMRON

H8214-1A

오므론 음파식 전동 칫솔

HT-B214



오므론 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.

- 안전하고 올바르게 사용하기 위하여 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 본 설명서는 품질보증서를 겸하고 있습니다. 분실하지 않도록 잘 보관하여 주십시오.

다음에 해당하는 분은 사용하지 마십시오. 또는 사용 전에 치과와 상담하여 주십시오.

- 입 안의 감각이 민감한 분
- 구강 또는 치주 수술 직후이거나 치료 중인 분
- 구강 내에 신경쓰이는 증상(치료 중인 치아, 불안정한 의치 등)이 있는 분
- 잇몸에서 출혈이 계속되거나 대량의 출혈이 있는 분

건전지나 전동칫솔은 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두고, 자녀 혼자 사용하는 것은 피해 주십시오.

※ 3세 미만의 영유아에게는 사용을 자제하여 주십시오.  
이식형 의료 기기(심장 박동기 등)의 장착 부위에서 10 cm 이내로 가까이 하지 마십시오.

욕실 내 등의 물이 닿는 장소에서 사용하지 마십시오.

건전지의  $\oplus/\ominus$ 극을 올바르게 넣어 주십시오.

지정된 건전지를 사용하여 주십시오.

장기간 사용하지 않을 때는 건전지를 분리하여 주십시오.

또, 다른 건전지는 바로 분리하고 새것으로 교환하여 주십시오.

- 액 누출 등으로 인해 본체의 파손이나 부상의 원인이 됩니다.  
건전지의 액이 눈에 들어가거나 피부에 묻은 경우에는 바로 다량의 물로 씻어내고 의사의 치료를 받아 주십시오.

치아나 치주에 칫솔을 강하게 놀려서 대거나 칫솔모가 아닌 플라스틱 부분을 대지 마십시오. 또, 장시간 같은 부분을 닦지 마십시오.

사람 이외에는 사용하지 마십시오.

본체를 밟거나 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

스스로 의사 표시를 할 수 없는 분은 사용하지 마십시오.

분해나 수리·개조를 하지 마십시오.

## 1 사용 상 주의사항

사용하기 전에 반드시 읽어 주십시오.

기재된 내용은, 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 사용자나 다른 사람들에 대한 위해, 물적 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다.

\* 물적 손해란, 가옥이나 가산 및 가축이나 반려 동물에 관한 확대 손해를 말합니다.

### 보증규정

- 사용설명서, 본체 부착 라벨 등의 주의사항에 따라 정상적으로 사용한 상태에서, 구입 후 1년 이내에 고장이 발생한 경우 무상 수리해 드립니다.
- 무상 수리 기간 내에 고장이 발생하여 수리를 받아야 하는 경우에는, 오므론 고객서비스 센터로 연락하여 주십시오.
- 무상 수리 기간 내인 경우라도 다음과 같은 경우에는 유상 수리가 됩니다.  
(1) 사용자의 실수 및 부당한 수리나 개조에 따른 고장이나 손상  
(2) 구입 후 제품을 떨어뜨리는 등에 따른 고장이나 손상  
(3) 화재, 지진, 수해, 낙뢰, 기타 천재지변이나 공해, 전원의 이상 전압, 지정된 것 이외의 사용전원(전압, 주파수) 등에 따른 고장이나 손상  
(4) 품질보증서의 표시가 없는 경우  
(5) 품질보증서에 구입년월일, 판매처가 기록되지 않은 경우 또는 기록 내용을 수정한 경우  
(6) 소모부품  
(7) 고장 원인이 본 제품 이외에 있는 경우  
(8) 기타 사용설명서에 기재되어 있지 않은 사용방법에 따른 고장이나 손상
- 품질보증서는 본 규정에 명시된 기간, 조건에 따라 무상보증을 약속하는 것입니다. 따라서 이 보증서가 고객님의 법률상 권리를 제한하지는 않습니다.

### 품질보증서

오므론 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 엄격한 검사를 통해 뛰어난 품질을 확보하고 있습니다. 그러나 정상적인 사용에서 고장이 발생하였을 경우는 보증규정에 따라 구입 후 1년 동안 무상 수리해 드리거나 고장 내용 또는 제품에 따라서는 교환 또는 다른 기종으로 교환해 드립니다.

※ 제품 보증은 한국 내에서 판매된 제품에 한합니다.  
This warranty is valid only in Korea.

※ 아래의 사항은 반드시 판매기점에서 날인하여 주십시오.

판매명 오므론 전동칫솔 HT-B214

고객명

주소


TEL

발매처  
한국오므론헬스케어(주)

서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 18층(서초동, 교보타워)

## 2 각 부의 명칭과 구성품

### ■ AAA 알칼리 건전지

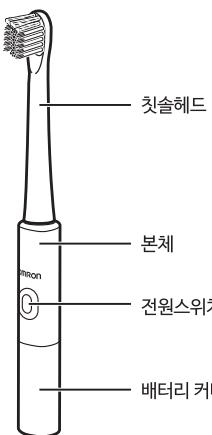


- 다음에 해당하는 분은 사용하지 마십시오. 또는 사용 전에 치과와 상담하여 주십시오.
- 입 안의 감각이 민감한 분
  - 구강 또는 치주 수술 직후이거나 치료 중인 분
  - 구강 내에 신경쓰이는 증상(치료 중인 치아, 불안정한 의치 등)이 있는 분
  - 잇몸에서 출혈이 계속되거나 대량의 출혈이 있는 분
- 건전지나 전동칫솔은 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두고, 자녀 혼자 사용하는 것은 피해 주십시오.
- ※ 3세 미만의 영유아에게는 사용을 자제하여 주십시오.  
이식형 의료 기기(심장 박동기 등)의 장착 부위에서 10 cm 이내로 가까이 하지 마십시오.
- 욕실 내 등의 물이 닿는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 건전지의  $\oplus/\ominus$ 극을 올바르게 넣어 주십시오.
- 지정된 건전지를 사용하여 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때는 건전지를 분리하여 주십시오.
- 또, 다른 건전지는 바로 분리하고 새것으로 교환하여 주십시오.
- ▶ 액 누출 등으로 인해 본체의 파손이나 부상의 원인이 됩니다.  
건전지의 액이 눈에 들어가거나 피부에 묻은 경우에는 바로 다량의 물로 씻어내고 의사의 치료를 받아 주십시오.
- 치아나 치주에 칫솔을 강하게 놀려서 대거나 칫솔모가 아닌 플라스틱 부분을 대지 마십시오. 또, 장시간 같은 부분을 닦지 마십시오.
- 사람 이외에는 사용하지 마십시오.
- 본체를 밟거나 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 스스로 의사 표시를 할 수 없는 분은 사용하지 마십시오.
- 분해나 수리·개조를 하지 마십시오.

## 3 건전지 넣기


본체와 손이 마른 상태에서 건전지를 넣어 주십시오.

### 1 배터리 커버를 돌려서 엽니다.

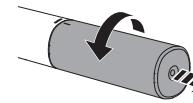

### 2 건전지를 넣습니다.


건전지의  $\oplus/\ominus$ 를 그림과 같이 넣어 주십시오.

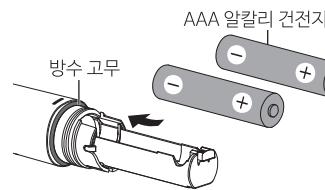

- 방수 고무를 분리하지 마십시오. 방수성이 손상되어, 물로 씻을 때에 물이 본체로 들어가서 고장의 원인이 됩니다.

### 3 배터리 커버를 돌려서 닫습니다.

본체 뒷쪽의 마크가 가 되는 위치까지 돌려 주십시오.

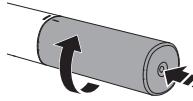

## 연속 사용 시간에 대해

AAA 알칼리 건전지 2개로 약 2.5개월간 사용할 수 있습니다. (실온 23°C, 1회 2분, 1일 2회 사용일 경우)

- 사용할 건전지의 상표, 사용 시간, 칫솔에 가해지는 압력 등에 따라서 다르므로 칫솔의 진동이 약해지면 즉시 건전지를 교환하여 주십시오.
- 동봉된 건전지는 시험용입니다. 2.5개월 이내에 수명이 다할 수 있습니다.

## 4 칫솔헤드를 장착하기

### 1 칫솔헤드를 본체에 꽂습니다.

칫솔헤드를 본체 정면 방향으로 딸깍하고 소리가 날 때까지 빠르게 꽂습니다.




## 5 칫솔을 사용하기

### 1 입 안에 칫솔헤드를 넣습니다.

물 또는 치약 등이 튀는 것을 방지하기 위해 입 안에 칫솔헤드를 넣은 다음 전원 버튼을 눌러 주십시오.

### 2 전원 버튼을 누릅니다.

칫솔모가 진동합니다. 칫솔모를 치아에 가볍게 대고 가로 방향으로 이동시키면서 닦아 주십시오.

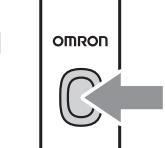


- 처음 사용하실 때, 독특한 자극을 느낄 수 있습니다. 이것은 음파식 전동 칫솔 특유의 음파 진동에 의한 것입니다.
- 사용 권장 시간은 1회 2분입니다.

### 3 다 닦은 다음 전원 버튼을 눌러서 전원을 끕니다.


- 전원을 켜 다음 약 3분 이내에 자동적으로 전원이 깨집니다. 양치질을 계속할 경우에는, 한 번 더 전원을 켜 주십시오.

## 올바른 칫솔질

칫솔모가 치아나 잇몸에 닿도록 가볍게 대 주십시오.

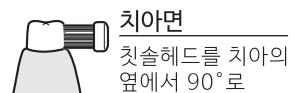

치아와 잇몸의 경계  
칫솔헤드를 치아의 옆에서 90°로 대 주십시오.

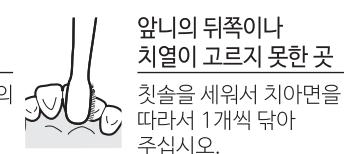

앞니의 뒤쪽이나  
치열이 고르지 못한 곳  
칫솔을 세워서 치아면을 따라서 1개씩 닦아 주십시오.


## 칠타이트를 움직이는 방법

손으로 닦듯이 움직이지 말고 치아를 하나씩 세듯이 가로 방향으로 이동시키면서 닦아 주십시오.

뒷면에 계속됩니다

## 6 사용이 끝나면

- 1 본체에서 칫솔헤드를 똑바로 당겨서 분리합니다.

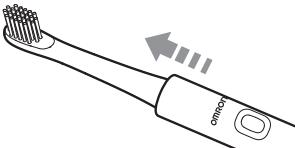

- 2 흐르는 물에 칫솔헤드를 세척하십시오.

물로 씻은 다음 잘 흔들어서 물기를 없애 주십시오.

- 3 흐르는 물에 본체를 세척하십시오.

- 배터리 커버가 풀린 상태, 또는 열린 상태로 씻지 마십시오.
- 스템과 본체 사이에 있는 고무 부분을 손상시키거나 스템에 필요 이상으로 힘을 가하지 마십시오. 고무 부분이 상하면 본체 내부에 물이 들어가서 고장의 원인이 됩니다.

- 4 물기를 닦고 보관합니다.

본체를 부드러운 마른 천으로 닦고 통풍이 잘되는 곳에 놓아 주십시오.

## 7 관리와 보관

### 관리에 대해

- 칫솔헤드, 본체는 항상 청결한 상태를 유지해 주십시오.
- 얼룩은 부드러운 마른 천으로 닦아내 주십시오.
- 심한 얼룩이 묻었을 때는 물 또는 희석한 중성 세제를 적신 천을 꽉 짜서 닦아내고, 부드러운 천으로 한 번 더 닦아 주십시오.
- 본체 내부에 물 등이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 물에 담가서 씻거나 물 안에 넣어서 방치하지 마십시오.
- 칫솔헤드, 본체를 알콜에 적시거나 40 °C를 넘는 따뜻한 물로 소독하지 마십시오.
- 소독액을 묻힌 천으로 닦지 마십시오.
- 얼룩을 제거할 때 벤젠, 시너, 에탄올 등을 사용하지 마십시오.



### 보관에 대해

- 다음과 같은 곳에 보관하지 마십시오.
  - 물이 닿는 곳
  - 고온, 다습, 직사광선, 먼지, 염분 등을 머금은 공기의 영향을 받는 곳
  - 진동, 충격이 있는 곳
  - 화학 약품을 보관하는 장소 또는 부식성 가스가 발생하는 곳
- 영유아, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼고 보관하여 주십시오.

위의 주의사항, 기타 올바른 사용 방법을 지키지 않는 경우에는, 품질에 책임을 지지 않습니다.

주소	서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 18층 (서초동, 교보타워)
소비자상담실	1544-5718
사용상 주의사항	1. 본 건전자는 충전이 되지 않은 1차 전자입니다. 2. 본 건전자를 장기간 사용하지 않을 경우 제품에서 빼서 보관할 것. 3. 누액의 우려가 있으므로 (+), (-)를 바르게 넣을 것. 4. 본 건전지에서 열을 가하거나, 태우지 말 것. 5. (+), (-)를 고의로 연결하지 말 것. Short 발생하여 화재, 화상의 우려가 있음. 6. 본 건전지를 고의로 분해하지 말 것. 7. 충전, 분해, 단락, 가열하지 말 것. 8. 다른 전지와 혼용하여 사용하지 말 것.

## 8 사양

판매명	오므론 음파식 전동 칫솔 HT-B214
전원	AAA 알칼리 건전지 2개(DC3.0 V)
소비 전력	약 0.75 W
건전지 수명	약 2.5개월(AAA 알칼리 건전지 2개로 실온 23 °C, 1회 2분, 1일 2회 사용일 경우)
진동 수	약 20,000회/분
사용 환경 조건	+ 5 ~ + 35 °C / 30 ~ 85 % RH
보관 환경 조건	- 20 ~ + 60 °C / 10 ~ 95 % RH
질량	본체: 약 60 g(칫솔헤드·건전지 포함)
외형 치수	본체: 전체 길이 약 200(칫솔헤드 포함) × 폭 약 21.8 mm × 깊이 약 21.8 mm
구성품	플라크 제거 칫솔헤드(1개), 시험용 건전지 (AAA 알칼리 건전지 2개), 사용설명서(품질보증서 포함)

사양은 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.

### 적합성평가 표시

식별부호	R-R-ohh-HT-B214
상호명	(주)한국오므론헬스케어
기자재 명칭 (모델명)	HT-B214
제조자/제조국가	Hi-P/중국

### 전기생활용품 안전법에 의한 표시

종류	B053W5002-19001
제조자명	Hi-P
기자재 명칭 (모델명)	HT-B214
제조국명	중국
수입자명	(주)한국오므론헬스케어
사용권장기간	본 제품에 조립하여 사용 시 유효기간 3개월

### 제품에 관한 문의, 별매품 또는 소모품 주문, 수리에 관한 의뢰는

오므론 헬스케어 고객지원

<https://www.omron-healthcare.co.kr/service/>

소모품·별매품 주문은

<http://www.omronmall.co.kr/>

오므론 고객서비스 센터

TEL 1544-5718

접수 시간 9 : 00 ~ 18 : 00 (휴일 제외 월~금)

서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 18층(서초동, 교보타워)

\*※사정에 따라 휴일 또는 접수 시간이 변경되는 경우가 있습니다.